

Ein starkes Team –  
für Menschen mit Diabetes, Rheuma  
oder empfindlichen Füßen





LucRo Spezialschuhe für Menschen mit Diabetes oder Rheuma schützen Füße vor Verletzungen und vermeiden Folgekomplikationen. Vier Kollektionen mit unterschiedlichen Weiten, Breiten, Größen und Designs bieten eine große Auswahl und damit beste Voraussetzungen dafür, den individuellen und optimalen Schuh zu finden.

Alle LucRo Modelle verfügen über die bewährten Konstruktionsmerkmale:

- anatomische Leisten
- druckreduzierende, weiche Polsterung des gesamten Schaftes
- durchgängig nahtfreies, atmungsaktives Microfaserfutter
- keine Vorderkappe
- verlängerte Fersenkappe
- in der Sohle integrierte oder anpassbare Versteifungselemente
- dreiteilige, stoßdämpfende Einlegesohle aus speziellem Weichschaum

Unsere Spezialschuhkollektionen LucRo classic, LucRo kinetic und LucRo ergonic sind bereits im Hilfsmittelverzeichnis gelistet. Bei entsprechenden Indikationen werden die Kosten, bis auf den gesetzlichen Eigenanteil, von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

LucRo classic	<b>31.03.08.0001</b>
LucRo kinetic	<b>31.03.08.0008</b>
LucRo ergonic	<b>31.03.08.0024</b>
LucRo sportic	Hilfsmittelnummer beantragt



Die NovaPED soft Einlagenrohlinge sind speziell für Menschen mit Diabetes oder Rheuma entwickelt. Druckstellen bei Menschen mit Diabetes können zu einem ernsthaften Gesundheitsrisiko werden. Die Formgebung und Materialkombination der Einlagen sorgen für gleichmäßige Druckumverteilung und Vermeidung von Druckspitzen. Aufgrund der guten Polstereigenschaft lassen sich auch rheumatisch veränderte Füße erfolgreich versorgen.

Das Besondere: Unsere Konzepte sind auf die Kombination mit unseren LucRo Spezialschuhen abgestimmt. NovaPED soft Einlagenrohlinge optimieren die plantare Druckverteilung, vermindern deutlich Druckspitzen und leisten so einen bedeutenden Beitrag zur Vermeidung jeglicher Fußwunden.

Versorgungen mit diesen Einlagenrohlingen werden mit entsprechender Indikation über die PG 08 mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet. (Individuell geformte diabetesadaptierte Fußbettungen können nach PG 31 verrechnet werden.)

## Indikationen

- Angio-neuropathische Fußveränderungen
- Rheumatischer Fuß

## In möglicher Kombination mit

- Knick-Senk-Spreizfuß
- Ballenhohlfuß



### 3 Konzepte – 1 gemeinsames Ziel

Für die Versorgung empfindlicher Füße, aufgrund von Diabetes oder rheumatischen Erkrankungen, bieten wir drei Einlagenkonzepte an:




Bei allen Konzepten handelt es sich um Versorgungen mit Weichpolsterbettungseinlagen, die alle ein gemeinsames Ziel haben:


- gleichmäßige Druckumverteilung unter der Fußsohle und Reduzierung lokaler Druckspitzen
- Vermeidung von Verletzungen und Wunden am Fuß, wie z. B. Ulzerationen
- Verhinderung von Folgekomplikationen, wie Entzündungen oder Amputationen



Barfuß

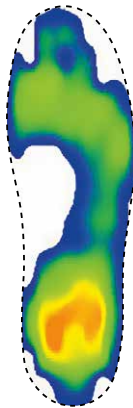

Schutzschuh  
ohne Einlage

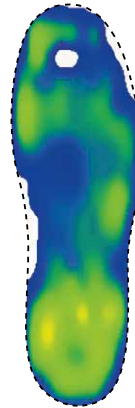

Schutzschuh mit  
Weichpolsterbettungseinlage

## Basis

Bei unseren NovaPED soft Einlagenrohlingen für LucRo Spezialschuhe handelt es sich um mehrschichtige, druckumverteilende Weichpolsterbettungseinlagen. Die Rohlinge verfügen über eine moderate Längsgewölbeabstützung und haben keinen Pelottendruck. Der Umriss ist an unsere LucRo Schutzschuhmodelle angepasst. Wahlweise sind die Rohlinge mit oder ohne Bezug erhältlich.

<b>Optional mit Deckenbezug</b>	Scheinova
<b>Polsterschicht</b>	Lunairmed, 18° Shore A, 6 mm
<b>Versteifung</b>	flexibler Spezialkern
<b>Unterbau</b>	Lunairflex, 22° Shore A, 6 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
972204...	LucRo classic Damen	34–45
972105...	LucRo classic Herren	37–50
972214...	LucRo kinetic LucRo sportic Damen	34–45
972115...	LucRo kinetic LucRo sportic Herren	37–50
979481...	LucRo ergonomic Damen	34–45
979480...	LucRo ergonomic Herren	37–50

-000 ohne Bezug

-637 mit Bezug\*

\* PG-08-konform.



# Komfort

Die NovaPED soft ist eine mehrschichtige, druckumverteilende Weichpolsterbettungseinlage. Die anatomische Formgebung des Leistens besteht aus einer Schalen-Fersenführung, einer Aussparung der Basis V und einer retrokapitalen Querabstützung.

Die Einlagenrohlinge sind in Damen- und Herrenauführungen erhältlich, wahlweise mit oder ohne Microfaserbezug. Die jeweiligen Umriss sind für die Anpassung in unsere LucRo Schuhe für Menschen mit Diabetes oder Rheuma geeignet.

<b>Optional mit Deckenbezug</b>	Microfaser
<b>Polsterschicht</b>	<i>Kombination aus:</i> ARUfoam, 14° Shore A, 3 mm p2 resorb, 10° Shore A, 2 mm ARUfant supersoft, 25° Shore A, 4 mm
<b>Versteifung</b>	THK-Versteifung
<b>Unterbau</b>	ARUfant, 55° Shore A, 8 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
971880-000	ohne Bezug Damen	35–48
971881-000	mit Bezug* Damen	35–48
971870-000	ohne Bezug Herren	35–52
971871-000	mit Bezug* Herren	35–52

\* PG-08-konform.



# Individuell


Bei den ARU®combi TricoDirect® Produkten handelt es sich um hochwertige EVA-Materialien aus drei unterschiedlichen Schichten in gewichtsklassifizierten Shorehärten. Diese sind zur Anfertigung einer diabetesadaptierten Fußbettung nach PG 31 oder einer druckumverteilenden Fußbettung für Rheumatiker geeignet.

Durch die Verbindung der einzelnen Schichten im Herstellungsprozess (Vulkanisation) ergeben sich viele Vorteile in der Verarbeitung:

- kein Kleben notwendig
- sehr geringer Schrumpf
- keine Materialverschiebung bei der Bearbeitung
- thermoplastisch verformbar in einem Arbeitsschritt bei ca. 120°–130°C, ca. 7 min.
- Abkühlungszeit ca. 14 min.

## ARU®combi TricoDirect® 12

5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A  
 5 mm ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A  
 12 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A

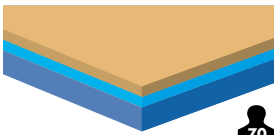



Patienten bis  70 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
46 0005-212	Stanzrohling
103 403 12	Platte, 950 x 550 mm

## ARU®combi TricoDirect® 8

5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A  
 5 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A  
 10 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A

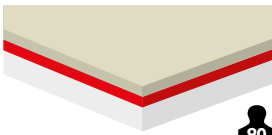


Patienten bis  90 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
46 0005-208	Stanzrohling
103 403 08	Platte, 950 x 550 mm

## ARU®combi TricoDirect® 10

5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A  
 5 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A  
 10 mm ARU®liso, ca. 55/60° Shore A

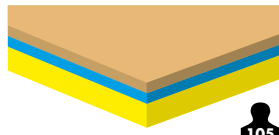

Patienten bis  105 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
46 0005-210	Stanzrohling
103 403 10	Platte, 950 x 550 mm

Erhältlich als Stanzrohling oder als Plattenmaterial

- Stanzrohlinge liefert Ihnen die Schein Orthopädie Service KG
- Ganze Platten werden über RuckgaberBrüggemann disponiert





Fachhändler

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid, Germany  
Tel. +49 2191 910-201  
Fax +49 2191 910-102  
remscheid@schein.de  
www.schein.de



— Germany since 1879 —

03.0966.30.12.18



099990-213

RuckgaberBrüggemann  
Orthopädie Service GmbH  
Roseckstraße 35  
72108 Rottenburg-Seebronn  
Tel. +49 7457 9497-0  
Fax +49 7457 9497-35  
rottenburg@schein.de  
www.schein.de

